

Provinovx



L'innovativo sistema di controllo dei pazienti

Il segnalatore di pressione corporea PROVINOXX è stato sviluppato specificatamente per ospedali, case di riposo e di cura, strutture psichiatriche, strutture protette e case private.

La cura e l'assistenza a persone affette da demenza e a rischio di cadute costituisce un impegno molto gravoso per il personale.

PROVINOXX contribuisce a ridurre sensibilmente tale impegno. Con PROVINOXX il personale di assistenza ha la certezza di essere informato immediatamente non appena l'assistito tenta di lasciare il proprio letto.

I vantaggi in breve

- Il personale di assistenza viene informato immediatamente
- Segnalazione prima che il residente / paziente abbia appoggiato i piedi per terra
- Nessuna attivazione accidentale del dispositivo di chiamata da parte di visitatori nonché del personale addetto all'assistenza e alle pulizie
- Nessun rischio di inciampare
- Nessun "buco nero" davanti al letto
- Installazione molto semplice
- Non richiede manutenzione
- Lunga durata
- Qualità svizzera

Vantaggi per il personale di assistenza e residenti / pazienti

Mentre i sistemi tradizionali segnalano quando il residente / paziente ha già lasciato il proprio letto, PROVINOXX vi informa molto prima, riducendo considerevolmente il rischio di caduta.

Con PROVINOXX il personale di assistenza ha la certezza di essere informato per tempo quando un residente / paziente desidera lasciare il proprio letto. Ciò rende superflui i controlli notturni e permette di potersi dedicare ad altre occupazioni.

PROVINOXX è un prodotto svizzero e viene prodotto in Svizzera. L'elevata qualità dei materiali e della lavorazione garantisce una lunga durata e l'assenza di manutenzione.

Installazione estremamente semplice


PROVINOXX viene inserito sotto il materasso nell'angolo del letto. L'elemento a pressione deve trovarsi nel punto il cui il residente / paziente si alza dal letto.

L'apparecchiatura viene collegata al dispositivo di chiamata delle infermiere mediante uno degli attacchi (destro o sinistro). All'altro attacco è possibile collegare la peretta di chiamata.

L'apparecchiatura è protetta dall'umidità grazie alla protezione antincontinenza. Stendere poi il lenzuolo ad angoli sul materasso e sul PROVINOXX

Se PROVINOXX viene utilizzato senza dispositivo di chiamata delle infermiere, il radiotrasmittitore viene collegato a uno degli attacchi, mentre il radoricevitore (campana) viene semplicemente inserito in una presa (rispettare il campo radio).

Qualsiasi tentativo da parte del residente / paziente di lasciare il letto viene segnalato mediante il dispositivo di chiamata delle infermiere o il segnale acustico radio.

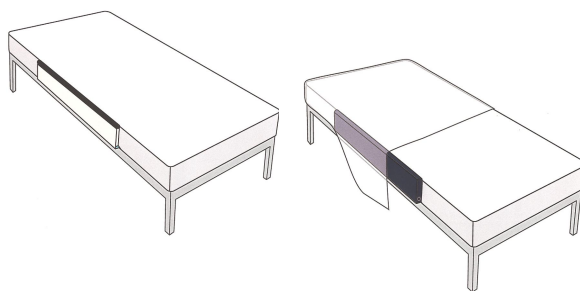

Dati tecnici

Tipo / Codice articolo

100 014

Dimensioni in mm (ca.):

- Basamente 800 x 250 x 13
- Parte anteriore 800 x 115 x 30

Installazione: Sotto il materasso

Peso: 3,5 kg

Contatto di commutazione: 2 contatto

Pulizia:

Detergenti reperibili in commercio

Protezione antincontinenza: Lavabile fino a 95°C, non centrifug.

Carico elettrico ammissibile: 24 Volt

Peso di attivazione: 7,0 kg

Commercializzazione / Ordini

Commercializzazione mediante negozi specializzati / rivenditori:

signakom Tel.: 0041 (0)56 221 01 01
Schwanenstrasse 2 E-mail: info@signakom.ch
5634 Merenschwand www.signakom.ch
Svizzera

Presentato attraverso:

